



LED.H Hærdelampe

Professionel hærdelampe til en meget fordelagtig pris.
LED.H har egenskaber der matcher langt dyrere lamper.

- Trådløs
- Metalopbygning
- Kraftigt, udskifteligt batteri
- 3 hærdemetoder: Konstant, Stigende, Pulse
- Tidsindstillinger: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 sek.
- Fuldt opladet kan der foretages 400 hærdninger á 10 sek.
- 70 dages stand by
- Konstant lysintensitet, også ved lav ladestand.
- Lysleder kan drejes 360° og kan autoklaveres ved 135° C.
- Output: 850 mW/cm² - 1000 mW/cm²
- Dimension: 25 mm x 252 mm
- Vægt: 178 g



CE

NETTO
DENTAL

TLF.: 70 20 44 44
www.nettodental.dk

LED.H Hærdelampe


LED.H hærdet effektivt

	3M komposit	Dentsply komposit
5 sek.	5,04-5,64 mm	4,39-4,68 mm
10 sek.	6,43-7,24 mm	5,02-5,45 mm


LED.H' s hærdedybde er testet med forskellige kompositter. Hærdedybden afhænger af mange ting, bl.a. hvor mørk farven er. Testblok medfølger, så du selv kan teste hærdedybden med netop din egen komposit.




3 hærdemetoder:

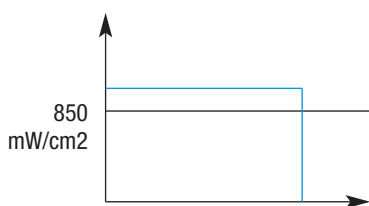

Konstant

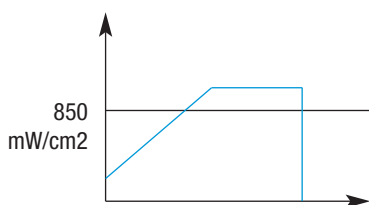

Stigende

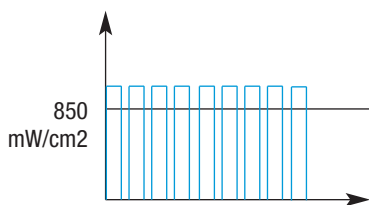

Pulse



NETTO
DENTAL

TLF.: 70 20 44 44

www.nettodental.dk